



Concentrador de Oxígeno Portátil HANDY

SOLO 2.2 kg
PESO TOTAL



**FLUJO DE OXÍGENO DE HASTA
3.5 Lt / min.**

Llévalo contigo a donde quieras con
su **estuche de viaje** y su **batería de
larga duración**

**Concentración de Oxígeno de 90
~ 96 % y dosis de flujo por pulso**

Incluye **ESTUCHE** para viajes

Concentrador de Oxígeno por pulso.

Sigue de forma inteligente la inhalación del usuario para suministrar oxígeno y la exhalación para detenerla, aliviando la irritación nasal causada por la descarga continua de oxígeno.

- Respuesta de sensor de suministro de Oxígeno en 0.02 seg
- Portable, llévalo contigo a todas partes
- Regulación de 4 niveles de flujo de oxígeno (Lt /seg)
- Sistema de Alerta Automático en caso de interrupción de flujo de oxígeno.



INFORMACIÓN TÉCNICA

• Rango de flujo de oxígeno: **3.5 Lt / min.**



• Concentración de oxígeno: **96 % ~ 90 %**




• Presión máxima de salida: **150 kPa.**



• Muy silencioso gracias a su nivel de sonido máximo de: **55 dB.**




Frecuencia respiratoria, respiración/ minuto (BPM)	Ajuste 1	Ajuste 2	Ajuste 3	Ajuste 4
	Volumen del pulso (ml)			
15	14.0	28.0	42.0	50.0
20	10.5	21.0	31.5	37.5
25	8.4	16.8	25.2	30.0
30	7.0	14.0	21.0	25.0
35	6.0	12.0	18.0	21.4
40	5.3	10.5	15.8	18.8
Volumen total por minuto (ml/ min)	210	420	630	750

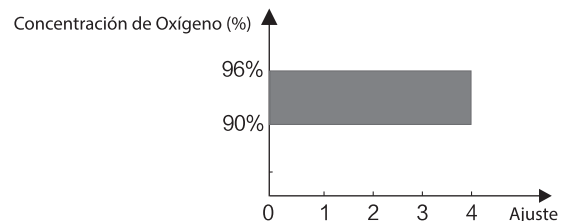





¡Antes de apagar!
Asegúrate que el equipo tenga 30 minutos de funcionamiento mínimo, para prolongar la vida útil de tu batería.

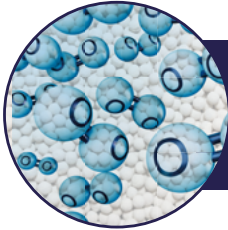

Excelente nivel de concentración de oxígeno gracias a su **tamiz molecular extraíble 5A O₂**.

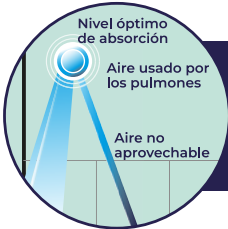

Sistema de flujo de pulso para una rápida y óptima absorción de oxígeno.

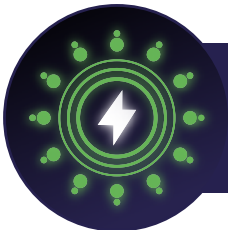

Con batería modular de litio de **6400 mAh**, para un trabajo rápido e ininterrumpido.



Batería recargable de fácil desmontado

NIVEL	Tiempo de funcionamiento de la batería recargable por nivel de potencia
1	5 h
2	3 h 20 min
3	2 h 20 min
4	2 h

Concentrador de Oxígeno Portátil HANDY



Dimensiones del producto

“Portátil, ligero y compacto.”


- El concentrador de oxígeno **7F-7** es una gran opción para disfrutar de una caminata en espacios abiertos por su gran ligereza de **2.2 kg** que proporciona flexibilidad al caminar y fácil transportación.
- Su innovadora tecnología de **DOSIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO POR PULSO**, le permitirá mantener un nivel de actividad constante así como desplazarse con libertad total.
- El concentrador cuenta con **batería recargable** que dura **3 hr 20 min** a una regulación de 2 niveles adaptándose a tu estilo de vida y garantizándote movilidad en cualquier momento y en cualquier lugar.



ACCESORIOS INCLUIDOS




Estuche de viaje 1 pza

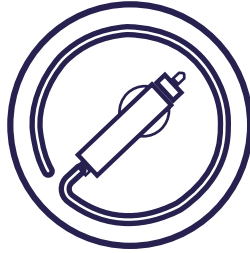

Adaptador de alimentación para automóvil 1 pza



Adaptador de alimentación CA 1 pza

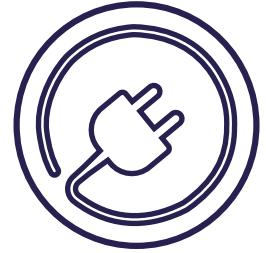


Cable de alimentación 1 pza



Filtros de fieltro 2 pzas



Porta Cánulas 1 pza

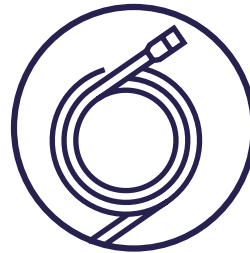

Cánula Nasal 1 pza



Manual de usuario 1 pza

3 tipos de alimentación de corriente para una toma de oxígeno ininterrumpida

Doméstico 120V AC



En Vehículo 12V/24V DC



Al aire libre con Batería Recargable

